

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NANOSKIN-SMART

Todas las imágenes en este manual son solo para referencia.
Consulte el producto físico para conocer las características específicas.

Precauciones de Uso

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar NanoSkin-Smart. Utilice NanoSkin-Smart tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado. Si ocurre algo inusual con el dispositivo o en la piel, deje de usarlo inmediatamente. El uso del instrumento defectuoso puede provocar una segunda falla o lesiones en la piel.

Sobre Nanoskin-Smart

NanoSkin-Smart es el primer equipo multifunción diseñado con 5 tecnologías en 1, diseñado para uso personal, fácil de usar, seguro y efectivo para que puedas obtener todos los beneficios de un tratamiento profesional en la comodidad de tu hogar. NanoSkin elimina impurezas, nutre, rejuvenece, cierra los poros y reafirma tu piel en la zona de rostro y cuello. NanoSkin rejuvenece mediante radiofrecuencia (RF) alcanzando los 40°C al interior de las capas profundas de la piel estimulando la producción de colágeno y elastina, reafirma mediante electro estimulación Muscular (EMS), limpieza facial mediante Iones (ION), nutre mediante electropormación (ENI) y cierra poros mediante frío (Cool).


NanoSkin-Smart en la función que trabaja solo con radiofrecuencia puedes utilizar gel conductor de radiofrecuencia y electro estimulación

Precauciones

Importante	Conecte adecuadamente el enchufe del cargador a la toma de corriente de la casa para evitar el mal funcionamiento o sobrecalentamiento del equipo.
	No exponga el equipo a altas temperaturas.
	No coloque el dispositivo en contacto con el agua o la humedad.
	No inserte y extraiga el cable de alimentación con la mano húmeda (puede provocar una descarga eléctrica y un cortocircuito)
	Si el producto presenta cualquier tipo de deformación por exposición a altas temperaturas o si la batería del equipo presenta alguna falla, detenga el uso de NanoSkin-Smart inmediatamente.
	Mantenga el dispositivo alejado de productos inflamables como aerosoles.
	No utilice cargadores rotos o que no se ajusten correctamente al toma corriente, puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos.
	No utilice cargadores que no cumplan con los requisitos anteriores, evite accidentes y daños en el equipo.
	No utilice adaptadores a una tensión de 100-240, para evitar incendios, descargas eléctricas, etc.
	Por favor no utilice este equipo para ningún otro propósito más que para él fue diseñado.

	Nunca intente desarmar el dispositivo o inserte objetos dentro de este, puede provocar serios daños al equipo y a usted. La compañía no se hace responsable por daños o mal uso del dispositivo.
	Mantenga el equipo alejado de los niños menores de 18 años.
	Detenga el uso o desconecte el equipo ante cualquier sobre calentamiento anormal.
	Antes de utilizar NanoSkin-Smart en el cualquier zona facial, realice una prueba de testeo en el antebrazo con y sin cremas. Si presenta cualquier sensacional anormal como dolor o ardor por más de 48 horas detenga su uso inmediatamente.
	Nunca deje el equipo detenido en una zona durante el tratamiento en el modo de radiofrecuencia, deslice NanoSkin-Smart suavemente sobre la piel.
	Por favor, use y mantenga la línea de carga correctamente. No doble, estire, retuerza, presione ni enrolle alrededor del cargador.

Componentes del dispositivo

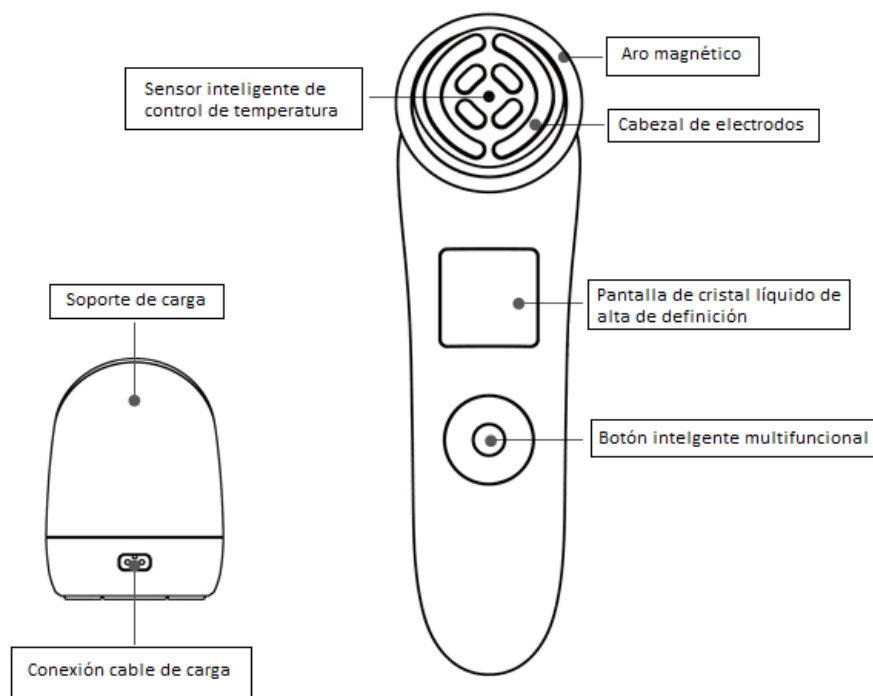

Accesorios

Dispositivo NanoSkin x 1



Soporte para carga x1



Transformador x1



Manual de uso x1



Introducción a la pantalla de visualización

Pantalla de cristal líquido de alta definición la cual te guiara paso a paso en cada función además de indicar los minutos por cada función.



Función Belleza



Función Nutrición



Función Modeladora



Bloqueo Nutrición



Función Libre



Manual de Uso







Usuario

Comienzo del tratamiento y Frecuencia de uso

Para comenzar su tratamiento completo debe empezar por la función BEAUTY, esta función incorpora todas las funciones para un tratamiento más eficaz, la función BEAUTY debe ser usada 3 veces por semana en los tiempos que le indicara la pantalla, el tratamiento completo debe hacerlo de 6 a 8 semanas , luego puede hacer mantenimiento del tratamiento en funciones libres.


Pasos a Paso

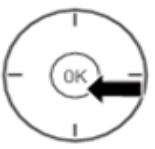Por favor siga los siguientes pasos e información para un correcto uso. Como referencia, vamos a explicar paso a paso del modo "Beauty"

1	Mantenga presionado el botón OK para encender el dispositivo.	
2	Selección de usuarios: En la primera pantalla (user select) elija el usuario 1 por defecto y oprima el Botón OK	
3	Selección modo Beauty: Oprima el Botón OK nuevamente para comenzar la función principal	
4	Selección modo Beauty: Con los botones hacia arriba y hacia abajo puede elegir la intensidad del tratamiento, recomendamos partir desde el tercer nivel para nivelar la tolerancia al tratamiento	
5	Función RF+ION: Primer paso es limpiar la piel para prepararla para los siguientes pasos. Como indica la pantalla, debe retirar el anillo metálico que rodea el cabezal y aplicar SOBRE EL CABEZAL una toallita de algodón (fina, pétalos de algodón no le servirán) aplicar un tónico de limpieza líquido a la toallita poner nuevamente el anillo para sujetar la toallita. Luego oprima la tecla hacia la derecha (start) comenzara la ionización del cabezal para limpiar su piel.	
6	Función RF+ENI: Segundo paso es la corriente galvánica o introducción de nutrientes por iontoforesis, en este paso debe retirar la toallita y limpiar el cabezal, luego aplicar un serum líquido con activos de acuerdo a sus necesidades, existen muchos serum en el mercado si tienes dudas puedes consultarnos a nuestros chat. Función RF+ENI está destinada hacer penetrar los activos del serum más profundo y rápido, lo que acelera y mejora los beneficios de tu serum. Como dato adicional con la el botón presionándolo hacia abajo puedes leer las siguientes instrucciones en pantalla.	
7	Función RF+EMS: tercer paso es la EMS (electro estimulación muscular), función destinada a trabajar los músculos faciales para tonificar y levantar la zona tratada. Limpia el cabezal con un paño o toallita de algodón y aplica el gel conductor sobre el cabezal o sobre la piel, debes aplicar cada vez que se este se seque hasta que termine el tiempo indicado en pantalla. Esta función es recomendable comenzar aplicando Nanoskin desde el mentón y deslizarlo hasta la sien de manera ascendente.	

8 **Función COOL:** Cuarto paso, función cool tiene como objetivo sellar el tratamiento, cerrando los poros y calmando la zona tratada, en esta función es recomendable aplicar un poco de agua fría (en lo posible filtrada) para conducir de mejor manera el frío del cabezal.

Ya terminaste tu tratamiento completo!



9 SEA CONSTANTE EN EL USO DE NANOSKIN, LOS RESULTADOS DEPENDERÁN DE SU CORRECTA APLICACIÓN Y PACIENCIA.


Modo libre

En el modo libre (FREE) hay seis funciones para que elija según sus necesidades de manera libre, recuerde solo usar las funciones 3 a 4 veces por semana.


1	<p>Radiofrecuencia: RF function</p> <p>Estimula la regeneración de colágeno y elastina, acelera el metabolismo de la piel, suaviza y tensa la piel.</p>	
2	<p>Electroestimulación: EMS function</p> <p>Masaje muscular de alta frecuencia, para modelar el contorno facial.</p>	
3	<p>Radiofrecuencia + Iones positivos: RF+Positive ion</p> <p>Limpieza de la piel, remueve la suciedad mas profunda.</p>	
4	<p>Radiofrecuencia + Electroporación: RF+Electroporación</p> <p>Ayuda a la piel a absorber los nutrientes de manera eficiente, para lograr una nutrición profunda.</p>	
5	<p>Radiofrecuencia + Electroestimulación: RF+EMS</p> <p>La función de RF y la función de EMS se llevan a cabo juntas, para eliminar líneas de expresion, reafirmar y tonificar zona de rostro y cuello.</p>	
6	<p>Compresión de frío: COOL</p> <p>Compresa fría para cerrar poros y tensar la piel.</p>	

Aviso: Por favor no use en exceso cada función en modo libre. Siga estrictamente el tiempo de tratamiento establecido por el manual. Un segundo tratamiento puede realizarse con un mes de descanso entre tratamientos completos.


Técnicas de uso del instrumento.

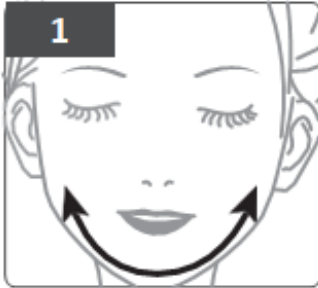


Deslice el dispositivo hacia arriba, desde la mandíbula hasta el lugar debajo de las orejas con movimientos circulares.

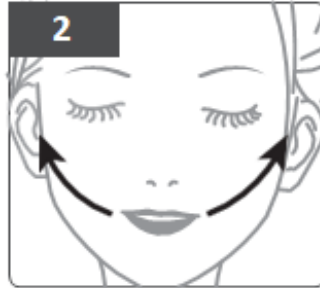

Deslice el dispositivo hacia arriba desde las esquinas de la boca hasta el lugar debajo de las orejas, en movimientos circulares.

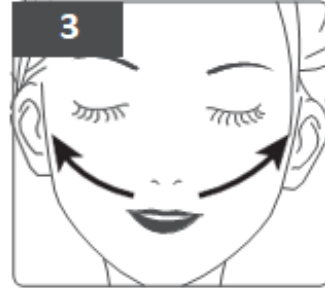

Deslice el dispositivo hacia arriba, desde la zona de bigote hasta las orejas, en movimientos circulares.

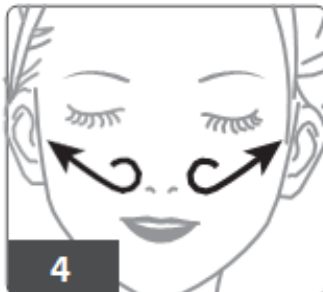

Masajee con movimientos circulares, desde las alas de la nariz hasta el costado de los ojos, y hacia arriba hasta la sien.



Deslice hacia arriba, desde el entrecejo hasta la línea del cabello en movimientos circulares.



Deslice lentamente por ambos lados del cuello, preste atención para evitar la zona de tiroides.

Importante





1. En cuanto a las técnicas, se sugiere deslizar en un movimiento circular ascendente y ajustar la intensidad de manera apropiada de acuerdo con la sensación individual.
2. Por favor, ajuste la intensidad si es incómodo cuando realice un cierto modo en un área pequeña.
3. Por favor use intensidad baja para proteger la piel alrededor de los ojos.
4. Por favor, evite las áreas de los ojos, los párpados inferiores y la zona de tiroides.
5. Nunca deje detenido el dispositivo en un lugar, ni presione la piel cuando utilice el equipo Nanoskin.

Limpieza y mantención

1. Por favor, limpie los cabezales antes de usar.
2. Limpie el bucle del imán y la sonda con un algodón de maquillaje o un paño suave. Preste atención a la limpieza y mantenimientos del instrumento.
3. Por favor, nunca lave con agua o alcohol el dispositivo.

Modo de carga

Siga los siguientes pasos para cargar el producto por primera vez o con poca batería.

 <p>1</p>	<p>Inserte un extremo del cable alimentador correctamente en la base de carga.</p>
 <p>2</p>	<p>Enchufe el cargador a la toma corriente de la casa.</p>
 <p>3</p>	<p>Cuando el dispositivo comienza a cargar, la pantalla del host se ilumina y la barra de energía parpadea. Cuando está completamente cargada, la pantalla se iluminará y la barra de energía indicara carga completa. El tiempo de carga es de 3 hrs. 30 minutos.</p>
 <p>4</p>	<p>Desconecte el adaptador de la toma de corriente y vuelva a guardar todas las piezas cuando el producto esté completamente cargado.</p>

✘ Si el producto tiene poca batería durante su utilización, puede conectar directamente en la parte de abajo del equipo el cable alimentador. Este producto puede ser cargado durante el tratamiento.

Especificaciones del producto

Tipo de adaptador	NTB-0901500V2
Voltaje de carga	DC9V
Capacidad de batería	650mAh
Tiempo de carga	3 horas y 30 minutos aproximadamente
Pixeles pantalla	240*220
Tamaño pantalla	1.5 pulgadas
Función botones arriba y abajo	Ajustar nivel de intensidad
Función botones derecha e izquierda	Seleccionar modo de tratamiento
Función boton OK	Confirmación, Encendido/Inicio/Apagado, Pausa
Niveles de intensidad	5 niveles

✘ Los parámetros de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir los niveles de intensidad?

Con las teclas izquierda/ derecha se puede bajar o subir los niveles de intensidad, según su preferencia.

¿Es este dispositivo apto para menores?

De acuerdo con el ciclo de crecimiento de la piel, se sugiere que este producto sea utilizado por personas mayores de 20 años.

¿Por qué mi piel se calienta tanto durante el tratamiento?

Se sugiere usar NanoSkin en el nivel más bajo, en las primeras utilizations, hasta acostumbrarse a la temperatura. Si está familiarizado con el uso de este producto, puede elegir el nivel adecuado según la situación de cada piel.

¿Es este producto adecuado para diferentes tipos de piel?

Está contraindicado su uso en pieles con rosácea, dermatitis, eczemas, psoriasis o cualquier tipo de condición que se active con el calor. NanoSkin alcanza los 40°C en la función de radiofrecuencia.

También está contraindicado su uso en personas con cáncer o haya sufrido en el pasado, en especial cáncer de piel o lunares premalignos.

¿Quiénes no pueden utilizar NanoSkin?

- No puede ser utilizado por personas en periodo de embarazo y lactancia, personas con marcapasos, desfibrilador interno u otro dispositivo electrónico implantado. Personas con deterioro del sistema inmunológico debido a enfermedades inmunosupresoras como Sida o por el uso de medicación inmunosupresora.
- No puede utilizar NanoSkin si tiene implantes metálicos en la zona de tratamiento (como coronas de oro o hilos tensores). No es el caso de implantes dentales.
- Antecedentes de cicatrización queloide, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- Cualquier procedimiento quirúrgico, realización de nueva piel mediante laser o exfoliación química profunda dentro de los últimos 3 meses o que todavía se encuentra en proceso de cicatrización completo.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales o permanentes en la zona de tratamiento, consulte a su médico antes de utilizar NanoSkin.

¿Es este producto adecuado para usar en el baño o en el lavado de cara?

Este producto no es de alta impermeabilidad, por lo tanto, no lo use cuando tome un baño. Se sugiere utilizar NanoSkin fuera del baño.

Solución de Problemas

Si el dispositivo no funciona como debería, las siguientes notas le ayudaran a detectar posibles problemas en el dispositivo y su configuración.

Falla Detectada	Posibles Causas	Solución
El equipo no carga	El dispositivo no está conectado correctamente al soporte de carga.	Coloque el dispositivo en el soporte de carga y asegúrese de que el punto de conexión esté completamente conectado a la base de carga.
	La base de carga no está conectada correctamente con la toma de corriente.	Compruebe la conexión del cargador a la toma de corriente de la casa o compruebe si la toma de corriente de la casa ha fallado.
El equipo no enciende	No se ha presionado el botón de encendido correctamente	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y el equipo se activará.
	La batería del dispositivo se queda sin energía.	Haga una carga completa de la batería.
Falla operativa	Batería baja	
	No conecta.	Por favor presione el botón de encendido
	La batería instalada internamente ha alcanzado su vida útil.	Consultar garantía en la tienda o centro de atención al cliente de este producto.
	No se puede escoger una función de uso	Presione las teclas arriba/abajo y luego presione el botón central OK
	El tiempo de operación ha terminado.	Por favor, elija nuevamente una función.

Servicio postventa

Acerca de la batería interna

- Este producto utiliza una batería de litio, la batería tiene una garantía de seis meses.
- Este producto se desconectará automáticamente cuando esté completamente cargado. No es necesario sacar el dispositivo de la base de carga.
- La batería recargable interna de este producto es una batería de litio.

Eliminación del dispositivo

- NanoSkin se considera un dispositivo electrónico y debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de procesamiento de desechos si se va a abandonar el producto.

Garantía

El dispositivo cuenta con 1 año de garantía en el caso que presente fallas de funcionamiento o defectos materiales, el producto tiene derecho a una evaluación técnica desde su proveedor legal de NanoSkin. Esta garantía se extiende solo al comprador minorista original con el comprobante de compra original y solo cuando se compra a un minorista o revendedor autorizado.

1 Preste atención a la siguiente información para proteger los derechos legales de los consumidores

- Conserve el embalaje del producto, los accesorios, la factura de compra, etc.
- Puede solicitar el servicio postventa en línea de nuestro producto, luego manejarlo de acuerdo con el resultado de la comunicación o enviar el producto con un problema de calidad a nuestra empresa.
- La validez de su garantía se calcula a partir del día de la factura emitida, o puede consultar el tiempo de compra en el registro del sistema de comercialización de nuestra empresa.

2 Derechos del consumidor si el producto falla funcionalmente y no está dañado por factores creados por el hombre durante el uso normal del instrumento de rejuvenecimiento inteligente.

- Dentro de los 7 días a partir del día de la compra, puede optar por devolución o cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.
- Dentro del 1 año a partir del día de la compra, puede optar por cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.

3 Cuando ocurre una de las siguientes situaciones, el producto está fuera del alcance de la garantía gratuita.

- No tiene una factura válida está borrada.
- El producto está dañado por no uso, mala mantención o conservación.
- El producto está dañado por exceso de fuerza en modo de uso.
- El producto está dañado por haber sido desarmado o reparado sin la autorización de la compañía NanoTime
- El producto está dañado debido a la humedad, caída o quemado de la placa de circuito
- La superficie del instrumento se daña durante el uso, a excepción de la grieta de la carcasa debido a la estructura y el material.
- Fallo o daño resultante de la conexión de este producto con otros dispositivos de carga.
- Las fallas o daños resultantes de incendios, desastres naturales, daños por sal o voltaje anormal, etc.