

Español

Depiladora IPL (Foto depilación)

Manual de Instrucciones

Gracias por la compra de este producto.

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar DepiTime. Utilice DEPITIME tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado.

Precauciones de seguridad.

DEPITIME utiliza tecnología basada en la irradiación de luz IPL y calor, debilitando el folículo piloso del vello hasta eliminar su crecimiento de forma permanente. La integración de una aplicación de tecnología óptica en el campo de la belleza y la salud, este producto es el más práctico y profesional en este campo.

Con la prioridad de garantizar a los clientes efectividad y seguridad de uso, lea y comprenda todas estas indicaciones y consideraciones de tratamiento. **DEPITIME** está diseñado con el estándar más alto de calidad.

DEPITIME es adecuado para mujeres y hombres que quieren eliminar el vello extra. El dispositivo está diseñado para uso corporal solo en las zonas indicadas.

Se puede utilizar en pieles de cualquier color excepto el negro. Las personas con piel marrón deben comenzar con el nivel más bajo y ajustarse al equipo adecuado según la adaptabilidad de su piel.

- Este producto se usa principalmente para inhibir el crecimiento del vello corporal.
- Lea atentamente las instrucciones antes de usar (especialmente sobre las precauciones de seguridad) y luego use el producto correctamente.
- Si advierte alguna anomalía en el dispositivo y la zona de tratamiento, detenga el tratamiento inmediatamente.
- El sobre uso puede provocar fallas secundarias en el dispositivo o daños en la piel.

Peligro	Contenido importante de funcionamiento defectuoso que puede provocar lesiones.
Advertencia	Contenido importante de funcionamiento defectuoso causando peligro.
Aviso	Contenido importante de funcionamiento defectuoso que puede afectar la seguridad personal o daños a la propiedad.

Peligro

 Prohibido usar	No utilice el dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador interno u otro dispositivo electrónico implantado.
 Precaución de Uso	No usar en niños, personas que consumen medicamentos para dormir, personas con problemas de percepción de la temperatura, los que que tienen trastornos neurológicos, etc.

Advertencia

No use DEPITIME en las siguientes circunstancias.

- Niños y ancianos
- Si está embarazada, amamantando y 2 meses después del nacimiento
- En zonas con piel bronceada por el sol, cama bronceadora o cremas autobronceantes ya que esa zona puede ser susceptible a daños
- Si tiene problemas de piel activos como acné, psoriasis, eczema, quemaduras de sol, melasmas, herpes simples, heridas abiertas o sarpullido. Estas dolencias pueden volver la piel más sensible a la luz y más susceptible a los daños.
- Directamente en zonas de la piel con tatuajes, ni manchas de color marrón oscuro y negro (como lunares, marcas de nacimiento o pecas grandes). Estas zonas pueden absorber demasiada energía luminosa, que puede dañar la piel
- Inflamación local y sistémica; Grupo fotosensible y cutáneo que están usando drogas fotosensibles.
- Si usted es sensible a la luz (fotosensible) o tome algún medicamento que le provoca sensibilidad.
- En las orejas, cuello, pezones, contorno de ojos, zonas genitales, ni alrededor del ano. El uso de **DEPITIME** puede provocar daños graves en estas áreas.
- Tiene un marcapasos, desfibrilador interno u otro dispositivo electrónico implantado.
- Está sufriendo cáncer o lo ha sufrido en el pasado, en especial cáncer de piel o lesiones premalignas.
- Patologías concurrentes graves como enfermedades cardíacas.
- Personas con alguna anomalía en la piel provocada por diabetes.
- Personas con implantes metálicos en implantes de silicona en la zona de tratamiento.

Deje de usar si hay alguna reacción adversa.

- En caso de que note alguna sensación anormal, deje de usar DEPITIME inmediatamente.
- En caso de inflamación de la piel después de la irradiación (enrojecimiento prolongado, etc.), deje de usar inmediatamente.
- Si la zona de tratamiento presenta inflamación por más de 2 días, detenga el tratamiento inmediatamente.

Nunca dejar DEPITIME al alcance de los niños.

Mantenga este producto fuera del alcance de bebés y niños (un mal uso del dispositivo puede provocar accidentes o lesiones graves).

Aviso de uso.

No use agua, látex, aceite o crema plástica en la piel. Puede causar descargas eléctricas, mal funcionamiento, lesiones, etc. No lo use en partes sensibles como la boca / ojos, nariz, piel delicada, etc.

Nunca desarme el dispositivo.

Nunca intente desarmar el dispositivo o inserte objetos dentro de este, puede provocar serios daños al equipo y a usted. La compañía no se hace responsable por daños o mal uso del dispositivo.

En caso de sobrecalentamiento

Si el producto presenta cualquier tipo de deformación por exposición a altas temperaturas o si la batería del equipo presenta alguna falla, detenga el uso de Depitime inmediatamente ante cualquier sobrecalentamiento anormal.

Aviso

Cable alimentador

No utilice el cargador o alimentador de este dispositivo en otros dispositivos, de lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, fallos de funcionamiento, etc. No tuerza, enrolle o doble el cable alrededor del alimentador. No use las manos mojadas para manipular el adaptador, desconecte el alimentador cuando no lo esté utilizando.

Mantenga alejado de ambientes húmedos

No utilice este producto en bañeras, duchas u otros lugares con alta humedad, de lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, etc.

No utilizar en ambientes oscuros.

No utilice este dispositivo en ambientes oscuros para no dañar sus ojos. No dirija la luz del lente directamente a los ojos, utilice los protectores para los ojos.

Preste atención a la limpieza.

Después de cada uso, preste atención a la limpieza del lente para evitar la acumulación de grasa y otros residuos. Siempre limpie con una toalla seca y no mojada.

No obstruya el ventilador esto podría causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

Evite ralladuras

No raye la superficie de vidrio del cabezal de la lámpara, ya que puede dañar la fuente de luz o afectar el uso.

Importante

1. Antes de utilizar DEPITIME, asegúrese de que la apariencia del producto no esté dañada, que la luz indicadora de inicio y la temperatura sean normales.
2. Asegúrese de operar de acuerdo a lo que indican las instrucciones de uso.

Evite golpes

Evite golpear este producto que pueden provocar un mal funcionamiento.

Al consumidor

DEPITIME es un instrumento de belleza multifuncional, innovador en su categoría, con la función de depilación y rejuvenecimiento de la piel. DEPITIME utiliza tecnología basada en la irradiación de luz IPL y calor, debilitando el folículo piloso del vello hasta eliminar su crecimiento de forma permanente. Este producto utiliza una nueva generación de dispositivos IGBT, supercondensadores de alta calidad y tubos emisores de luz duraderos. La integración de una aplicación de tecnología óptica en el campo de la belleza y la salud, este producto es el más práctico y profesional en este campo.

DEPITIME posee una función de reconocimiento del color de la piel y sensores de seguridad para determinar si la piel es adecuada para la irradiación. Se puede utilizar en pieles de cualquier color excepto el negro. Las personas con piel marrón deben comenzar con el nivel más bajo y ajustarse al equipo adecuado según la adaptabilidad de su piel.


Para que el producto sea seguro de usar, antes y después de la irradiación, utilice una toalla fría o una compresa de hielo para enfriar el área irradiada.

Cuando use este producto, no aplique sobre la misma área durante mucho tiempo, de lo contrario puede producir demasiado calor, haciendo que la piel se sienta incómoda o provocar quemaduras en el área. No irradie la ropa o el cabello para evitar quemaduras o decoloración. Cuando ocurra un funcionamiento anormal o defectuoso, o se produzca un ruido anormal, retire el adaptador de CA del enchufe

Si es la primera vez que utiliza DEPITIME o es la primera vez que utiliza el dispositivo en un área nueva, por favor escoja una pequeña área para hacer un test de sensibilidad, lea atentamente las siguientes instrucciones:

- A. Encienda el dispositivo siguiendo las instrucciones que se muestran más adelante
- B. Escoja un área pequeña en su antebrazo o pierna. Realice el test en los niveles de intensidad 1 o 2
- C. Realice un disparo en el área
- D. Verifique la condición de la piel unos 30 minutos después de haber realizado el disparo en la zona del test de sensibilidad
- E. Si la piel del test es normal, entonces puede continuar con el tratamiento. Si esta roja e irritada, espere 24 horas y repita el mismo procedimiento.

Componentes del dispositivo

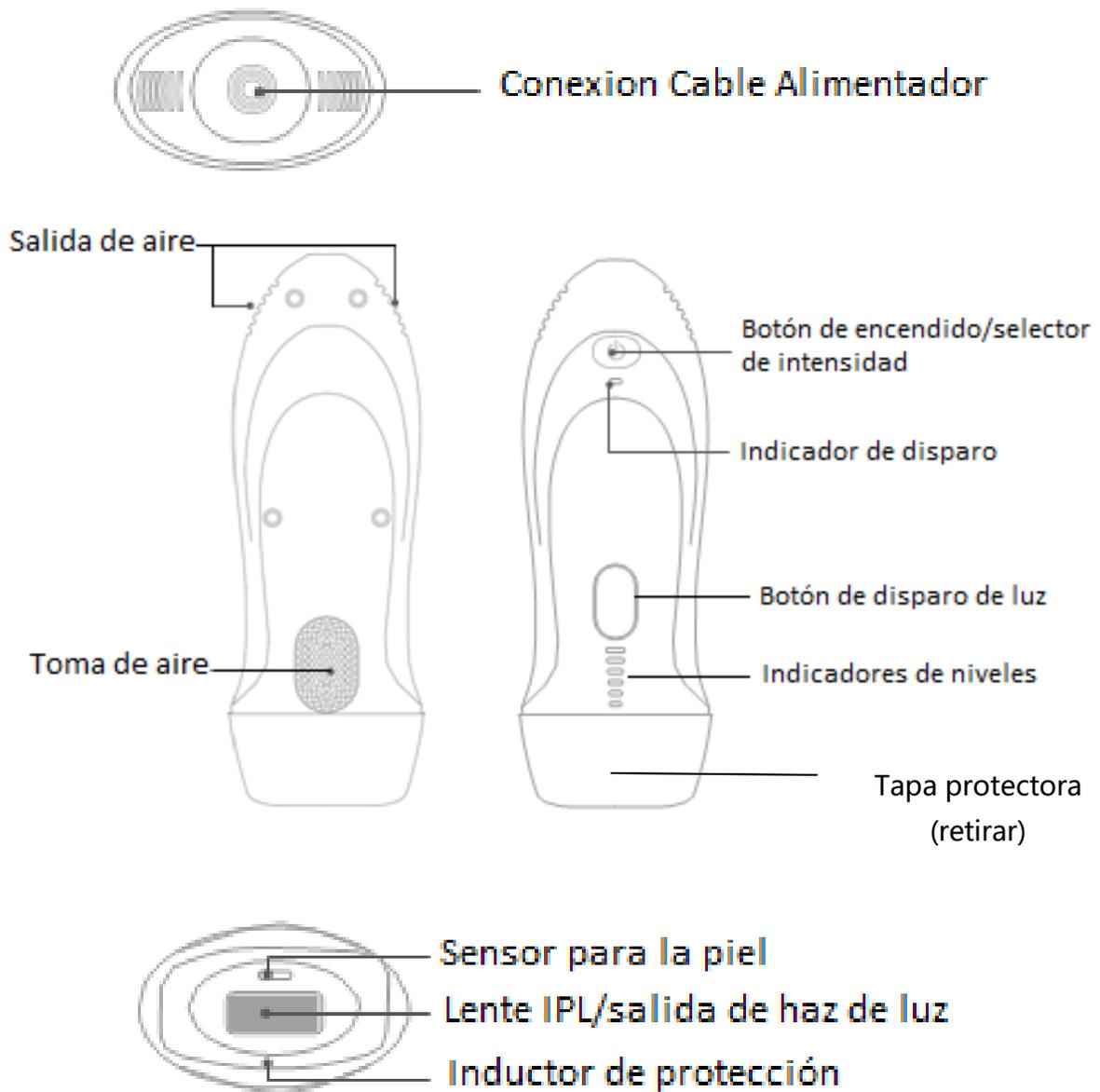

**RECUERDE RETIRAR TAPA TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN DELLENTE.
POR NINGUN MOTIVO TAPE LA TOMA DE AIRE TRASERA AL MOMENTO DEL USO.**

Botón de encendido/selectores de intensidad

1. Una vez conectado a la corriente, presione el botón de encendido por al menos 2 segundos para encender y apagar el dispositivo.
2. Una vez encendido, vuelva a presionar para cambiar entre los 6 niveles de intensidad.

Indicador de encendido / lanzamiento

1. La luz roja siempre está encendida cuando el equipo está en espera.
2. La luz se volverá verde cuando esté bien adherida a la piel y lista para el lanzamiento.

Botón para disparo de luz

1. Una vez encendida la luz verde, presione este botón para una irradiación única (disparo manual).
2. Una vez encendida la luz verde, mantenga presionado este botón para una irradiación continua (disparo automático).

Indicadores de nivel

Con el dispositivo encendido, el valor predeterminado es el nivel 1, presione brevemente el botón de selección de nivel para cambiar la intensidad.

Inductor de protección radiológica

Presione el botón de irradiación cuando el sensor toque toda la piel y la luz verde encendida.

Sensor de color de la piel

Cuando el color de la piel cumpla con los requisitos, presione el botón de irradiación para iniciar.

Accesorios



Dispositivo DEPITIME X1



Transformador X1



Protector Lente IPL X1



Manual de Uso X1



Gafas de protección X1

Zonas de uso



Importante: cuando use Depitime en área de rostro, átese el cabello para evitar quemaduras; no lo use en caso de quemaduras solares, tampoco alrededor de los ojos, cejas, sobre labios, etc.

Consulte "diagrama de color" para confirmar que se puede usar Depitime en su color de piel.

Modo de uso


**RECUERDE RETIRAR TAPA TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN DEL LENTE.
POR NINGUN MOTIVO TAPE EL VENTILADOR TRASERO AL MOMENTO DEL USO.**

1. Antes de usar DEPITIME

Primero limpie la zona a tratar, luego rasure (rasuradora de hojas) el área de tratamiento (rostro, axila, brazos, piernas, línea del bikini), debe esperar 6 a 8 horas . El vello debe estar en fase anágena, es decir, en etapa de crecimiento porque en esa etapa se sintetiza la melanina, que es el objetivo sobre el cual va a actuar la luz pulsada. Importante limpiar y secar muy bien el área de tratamiento para maximizar la cantidad de luz que puede absorber el folículo piloso para mejorar los efectos del tratamiento. Al mismo tiempo, confirme si hay condiciones anormales de la piel, como heridas, eczema, manchas de nacimiento, tatuajes, manchas por quemaduras solares excesivas, etc. Consulte los requisitos de contenido de "advertencia" mencionados en la página anterior.


2. Test de sensibilidad

Cuando lo use por primera vez o cuando no lo haya usado durante un período de tiempo, realice la operación de prueba de nivel adecuada de acuerdo con los siguientes métodos.

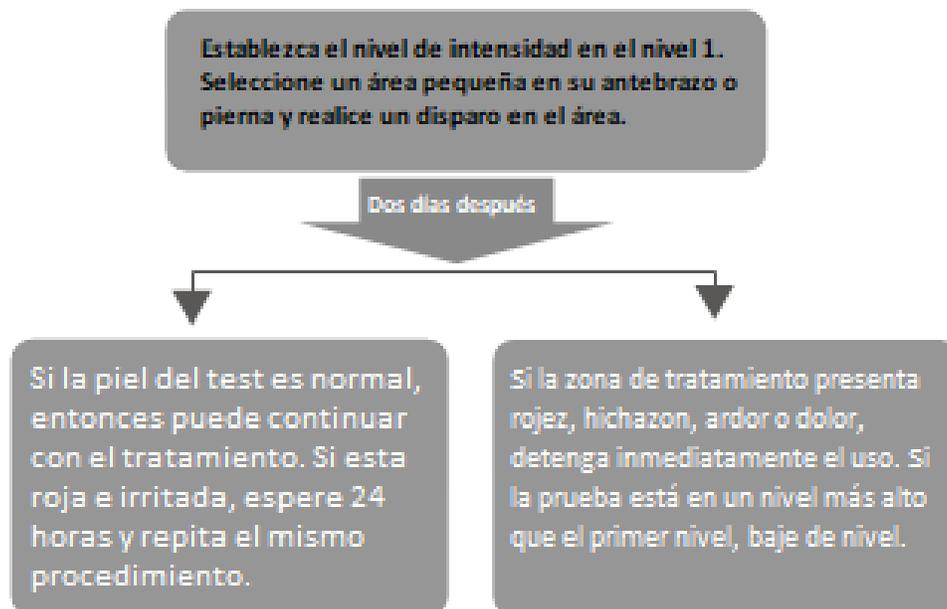

3. Uso

Una vez depilada la zona de tratamiento, enfríe la piel primero con una toalla fría o una compresa de hielo.

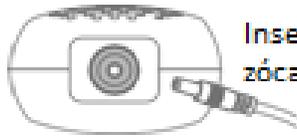

Inserte la conexión del cable alimentador en el zócalo del dispositivo.



Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido por al menos 2 segundos. Una luz roja le indicará que el dispositivo está encendido. Si el equipo no se utiliza durante 10 minutos este se apagará solo.

Tratamiento:

-Primer mes tratamiento, 1 vez cada 5 días: El vello no presentara mayores cambios en su aparición. Por favor sea paciente, el resultado te sorprenderá.

-Segundo mes de tratamiento, 1 vez cada 7 días: El vello crecerá delgado y débil. Verás pequeños vellos cayendo durante la ducha. La sorpresa está por venir.

-Tercer mes de tratamiento, 1 vez cada 15 días: El crecimiento de la mayoría de los vellos ha sido eliminado. El vello que aún crece puedes retirarlo fácilmente.

-A partir del cuarto mes de tratamiento, 1 vez cada 30 días. No hay vellos, el crecimiento ha sido eliminado del área de tratamiento. Ahora lucirás una piel perfecta por siempre.

Siguiendo el tratamiento indicado, DepiTime le ayudará a remover el vello corporal para siempre. Algunas zonas de tratamiento no requieren de mantención, otras requerirán de mantención durante un periodo de 6, 9 o 12 meses.

-Después del tratamiento, puede aplicar gel de aloe vera o un producto hidratante en la zona de tratamiento. No utilice cosméticos de inmediato

-Después de cada uso, preste atención a la limpieza para retirar grasa u otros residuos.


DEPITIME tiene seis niveles intensidad, desde la 1ª hasta la 6ª, presiona el “botón de encendido” para aumentar o disminuir la intensidad de la luz. Comience a usar con el nivel más bajo y luego aumentela gradualmente si se siente bien. Ajuste la intensidad de acuerdo con la adaptabilidad de su propia piel.

Para depilación de rostro se recomienda ajustar la intensidad desde el nivel 1 al 4 y usar siempre los anteojos protectores, mejor aún cerrar los ojos por la exposición muy cercana a la luz IPL.

Para depilación de zonas sensibles como axilas, zona de bikini, pubis, etc. Puede hacer la misma prueba de tolerancia, el nivel recomendado es el 1 al 4 si no tiene problemas de dolor o molestias puede continuar al 6.

Para piernas y brazos, puede hacer las pruebas desde el nivel 3 al 6, por lo general son zonas menos sensibles.

Use los protectores de ojos exclusivos para el producto (o gafas de sol normales) para evitar daños en sus ojos.

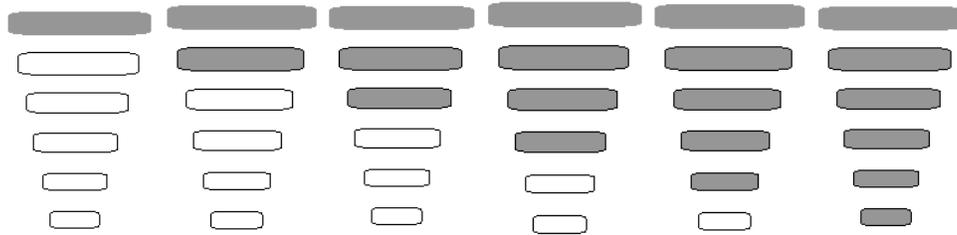

¿Qué hacer luego de depilar la zona?

Las sensibilidades de la piel son muy variadas y es probable que puedas encontrar alguna zona enrojecida que puedan ocasionar molestias o alguna sensación de picor. En cualquiera de los dos casos, siempre es aconsejable aplicar frío en la zona depilada para que pueda recuperar con facilidad su temperatura original, además de algún gel de aloe vera para calmar e hidratar la zona siempre es aconsejable.

Evite exposición al sol o uso de piscina durante el tratamiento, Durante las 48 horas posteriores a la depilación es recomendable evitar la exposición solar ya que la piel está todavía muy sensible. Además del sol, también es importante evitar bañarse en piscinas ya que el cloro puede llegar a **producir picores**.

Tonos de piel y color de pelo efectivos para el tratamiento

Revise su combinación de tono de piel y color de vello según la tabla

Tono de piel						
Color de pelo						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Disparo manual:

Con la configuración predeterminada, usted puede controlar el disparo manualmente, digamos, se lanzará un disparo con solo presionar el botón de emisión de luz. (Especial para la depilación de áreas pequeñas).


Disparo continuo:

Con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón de disparo y comience a desplazar el dispositivo por la zona de tratamiento. Todo lo que necesita hacer, es presionar el lente en su piel para que comience su trabajo. Luego, el dispositivo emitirá luz automáticamente. (Aplicar a la depilación para la piel de áreas grandes).

Atención: Cuando el dispositivo emite luz automática, no exponga otras áreas a la luz IPL que no sea el área que desea depilar y nunca deje que otras personas toquen el lente.

Coloque el cabezal del lente en el área de depilación y presione suavemente el cabezal, en ángulo recto con la piel.

Coloque el lente sobre el área de tratamiento, espere hasta que se enciendan los indicadores de preparación, luego presione el botón de emisión de luz. Mueva el lente hacia otra área de tratamiento y repita el mismo procedimiento, espere hasta que el indicador de preparación brille y presione el botón de disparo de luz. Repita estos pasos hasta cubrir toda la zona que desea depilar. Se sugiere irradiar un área 2 a 3 veces.

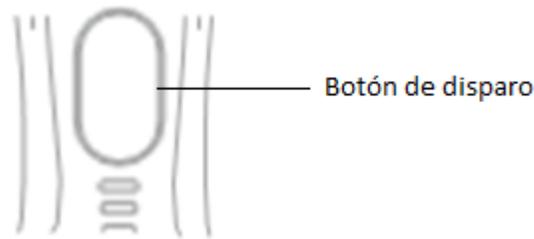

Aviso

- 1) Asegúrese que el lente IPL este firme sobre piel, si no el sensor no se conectara y no se emitirá la luz.
- 2) Una vez irradiada el área mueva el lente sin sobre poner sobre el área recién tratada e ir avanzando por la zona hasta completar el tratamiento y lograr con depilación general.
- 3) Para disparo continuo o automático, solo debe mantener presionado el botón de disparo y mover el lente sobre la zona de tratamiento.
- 4) Una vez terminado el tratamiento, apague el dispositivo presionando el botón de encendido por al menos 2 segundos, luego desconecte y vuelva a guardar en el empaque, mantenga en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños.
- 5) Use los protectores de ojos exclusivos para el producto (o gafas de sol normales) para evitar daños en sus ojos.
- 6) No obstruya los puertos de entrada y salida de aire del producto durante la operación, para no afectar la disipación de calor del dispositivo.
- 7) Una vez depilada la zona de tratamiento, enfríe la piel primero con una toalla fría o una compresa de hielo.
- 8) No se exponga al sol dentro de las 24 horas posteriores a la depilación; use protector solar durante las actividades al aire libre dentro de las dos semanas posteriores a la depilación (SPF +30 o superior); y no use cosméticos que puedan irritar o productos para el cuidado de la piel en los sitios de depilación.

Rejuvenecimiento / Método de operación

- 1) Inserte el filtro sobre la lámpara y encienda el equipo DepiTime.
- 2) Presione el botón de ajuste de intensidad hasta el primer nivel, dirija el cabeza de la luz hacia el área que requiere el rejuvenecimiento de la piel y emita el disparo. Le sugerimos que irradie la misma área solo 1 vez, una o dos veces a la semana. Después de dos o tres meses, verá un impacto significativo.


Importante: Se recomienda irradiar la zona tratamiento con un tipo de cabezal 1 vez al día. Si desea irradiar la misma zona con una función diferente, debe esperar hasta el día siguiente.

Limpieza y mantenimiento

Desconecte el dispositivo de la toma corrientes y espere 2-3 minutos. El lente de la lámpara debe limpiarse después de cada uso. Los métodos específicos son los siguientes.


Limpieza de DepiTime

Con una toalla limpia retire la suciedad de la superficie del producto, como la acumulación de polvo en la entrada y salida de aire. Preste atención para sacudirse y limpiar. NO se debe limpiar con productos húmedos o mojados. No use detergente, alcohol, aceite, agua, etc.

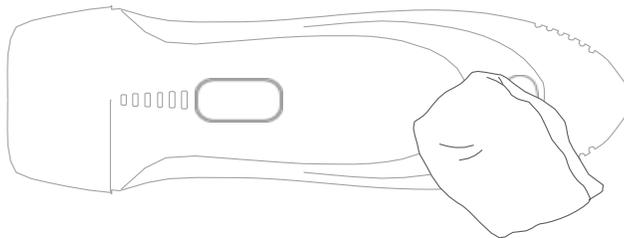

Limpieza del cabezal de irradiación.

En la zona del lente de la lámpara o del inductor de protección, límpielo suavemente con un bastoncillo de algodón.

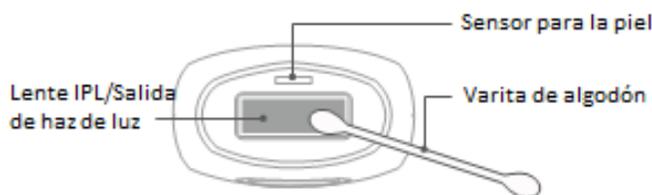

Especificaciones

Nombre	Depitime S
Modelo	B62E
Fuente de Luz	Xenon Flash Lamp
Fuente de alimentación	AC 100V ~ 240V 50/60Hz 12V 4A
Espectro de Luz	660-1200nm
Ratio de repetición del flash	Hasta 1 Hz (1 flash por segundo)
Área de irradiación	30×10mm
Medidas	70x41x203mm
Peso Neto	300grs
Vida útil	500.000 disparos
Niveles de intensidad	6 niveles
Dispositivo de seguridad	Inductor de protección/ sensor de color de piel.
Fuente de Poder	Adapatador y Transformador
Sistema de seguridad	DepiTime se apagará luego de 10 minutos sin uso.
Temperatura ambiente en uso	10 ~ 30°C
Humedad	30 ~ 85%
Rango de voltaje	AC100V-240V 50/60 Hz
Temperatura de almacenaje	5 ~ 35°C
Humedad de almacenaje	0 ~ 95%

Preguntas frecuentes

- **¿El haz de luz emitida por DepiTime afecta los ojos?**

Nunca use este producto alrededor de sus ojos. Por seguridad, use gafas de sol o gafas oscuras cuando use este producto.

- **¿Vida útil de la lámpara?**

DepiTime posee 500.000 veces por lo que su vida útil es de 10 a 12 años, ya que para un tratamiento de cuerpo completo está calculado que se utilizan de 1200 a 1500 disparos y los restantes son para mantención.

Cuando expire la vida útil de la lámpara, el indicador de iluminación encenderá la luz roja para indicar su vencimiento. La vida de irradiación de este producto es lo suficientemente larga para que pueda ser usada por más de una persona.

- **¿Se puede reemplazar el tubo de iluminación?**

La lámpara no se puede reemplazar.

- **¿Tengo que depilarme antes del tratamiento?**

Sí, si su modo de depilación es con rasuradora debe esperar 12 horas. Si su modo de depilación es con cera, pinza, etc. Debe esperar al menos 4 a 5 días. El vello debe estar en fase anágena, es decir, en crecimiento porque en esa etapa se sintetiza la melanina, que es el objetivo sobre el cual va a actuar la luz pulsada. Importante limpiar y secar muy bien el área de tratamiento para maximizar la cantidad de luz que puede absorber el folículo piloso para mejorar los efectos del tratamiento.

- **¿Siempre lograré una depilación completa?**

Los efectos de la depilación varían según las características de la piel o el vello de cada persona. La eliminación del vello es un proceso gradual, los resultados reales varían de una persona a otra y dependen del lugar del cuerpo que se trate. Que el vello vuelva a crecer con el tiempo depende de la persona, de la zona del cuerpo, del ciclo de crecimiento del vello y de si se siguen las instrucciones correctamente.

- **¿En que situación no es adecuado usar DepiTime?**

Por lo general, se puede usar vello oscuro como el negro y el marrón para la depilación. Vellos muy y blancos no puede absorber muy bien la energía de los fotones, y no es adecuado para la depilación.

- **¿El vello volverá a crecer luego de una irradiación?**

La depilación de fotones requiere ciclos repetidos para inhibir efectivamente el crecimiento del vello. Las características de crecimiento y el ciclo del cabello en diferentes partes de cada persona son diferentes, y

la energía de los fotones es el factor inhibidor más prominente para el crecimiento del cabello. Por lo tanto, es importante completar el tratamiento indicado para inhibir el crecimiento del vello.

▪ **¿Se pueden usar DepiTime en pieles bronceadas quemaduras y pieles oscuras?**

No se puede usar en zonas con piel bronceada por el sol, cama bronceadora o cremas autobronceantes ya que esa zona puede ser susceptible a daños. Se puede utilizar en pieles de cualquier color excepto el negro. Las personas con piel marrón deben comenzar con el nivel más bajo y ajustarse al equipo adecuado según la adaptabilidad de su piel.

▪ **¿En qué zonas puedo usar DepiTime?**

Se puede usar en rostro, barba, línea del bikini, axila, brazos, muslos, piernas. No se puede usar DepiTime en; contorno de ojos, labios, nariz, cabello, genitales y áreas de piel oscura, en particular, se debe prestar atención al uso de la línea del bikini.

▪ **¿Puedo usarlo en rostro?**

Si pero antes de comenzar el tratamiento en zonas faciales, átese el cabello para evitar que se quemé; no use alrededor de los ojos, cejas, labios, etc. No lo use después del maquillaje. Suspenda su uso cuando sienta dolor o enrojecimiento persistente. Presta atención a la reacción después de 2 días.

▪ **¿Es normal que el equipo emita sonido una vez encendido?**

Cuando el producto está en uso, la lámpara y el ventilador emiten sonido. El ventilador comenzará a funcionar para mantener la circulación del aire y enfriar el equipo.

▪ **¿Sentiré dolor durante la depilación?**

Cada vez que se irradia la energía del fotón para depilarse, la duración de la irradiación es menor que el tiempo de relajación térmica de la piel humana. En general, no hay dolor obvio. Si se aplica una compresa fría antes y durante la depilación, no habrá molestias. Si siente dolor durante la depilación, suspenda su uso.

▪ **¿A qué debemos prestar atención después de cada depilación?**

No debe exponerse al sol dentro de las 24 horas, ni deben usarse cosméticos irritantes o productos para el cuidado de la piel a base de alcohol.

▪ **¿Pueden los hombres usar este producto?**

Este producto puede ser usado tanto por hombres como por mujeres. Debido a que el cabello de los hombres es más grueso que el de las mujeres, seleccione el nivel adecuado antes de usarlo.

**RECUERDE RETIRAR TAPA TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN DEL LENTE.
POR NINGUN MOTIVO TAPE EL VENTILADOR TRASERO AL MOMENTO DEL USO.**

¿NECESITAS ASESORIA?

CONTACTANOS EN NUESTRA WEB WWW.NOVASKIN.CL Y ESCRIBELE A NUESTRA AGENTE



NovaSkin es representante en Chile de



NanoTime Beauty