

Español

Manual de Instrucciones

3E Skin

Gracias por la compra de este producto.

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar NANOSKIN-U.




Utilice NANOSKIN U tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado.

- Este dispositivo se utiliza principalmente para cuidar la piel del rostro.
- Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar NanoSkin-U.
- Utilice NanoSkin-U tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado.
- Si ocurre algo inusual con el dispositivo o en la piel, deje de usarlo inmediatamente. El uso del instrumento defectuoso puede provocar una segunda falla o lesiones en la piel.







Precauciones de seguridad

Peligro	Contenido importante de funcionamiento defectuoso que puede provocar lesiones.
Advertencia	Contenido importante de funcionamiento defectuoso causando peligro.
Aviso	Contenido importante de funcionamiento defectuoso que puede afectar la seguridad personal o daños a la propiedad.






Peligro

	Se recomienda cargar la batería antes de su uso. Conecte el cable alimentador de salida de 5V / 1 ^a , en la parte inferior del dispositivo y el otro extremo a cualquier fuente de carga USB y conecte a la corriente.
	Debido a que Nanoskin-U posee una batería interna, mantenga el dispositivo y cable alejado de las superficies calientes para prevenir un incendio o quemaduras graves. Apague inmediatamente Nanoskin-U si comienza a calentarse en exceso.
	El producto puede deformarse a altas temperaturas o bajo golpes fuertes. Si el producto está deformado, no lo use para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio.


Advertencia

	No utilice nunca este dispositivo con otro cargador o cable alimentador que no sea el de Nanoskin-U, podría provocar descargas eléctricas, incendios o quemaduras.
	Use este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado tal como se describe en este manual. Si no usa ni mantiene el Nanoskin-U de conformidad con las instrucciones recogidas en este manual, la garantía quedará anulada.
	No usar en niños, personas que consumen medicamentos para dormir, personas con problemas de percepción de la temperatura, los que tienen trastornos neurológicos, etc.
	Mantenga fuera del alcance de los niños.
	Deje de usar el producto inmediatamente y desconecte la alimentación en caso de calor anormal cuando lo use o lo cargue.
	En función Massage; prohibido usar en ojos, oídos y tiroides.

Aviso

	Asegúrese de que la apariencia del producto no esté dañada y que la luz indicadora de arranque y la temperatura sean normales antes de usar este producto
	Asegúrese de seguir las instrucciones del manual del producto.
	No desmonte ni modifique el dispositivo, ya que podría provocar daños en la Unidad, un funcionamiento defectuoso, una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales. Dentro de la unidad no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.
	No deje caer ni introduzca nunca ningún objeto en ninguna abertura del dispositivo.
 Aviso	El producto debe limpiarse después de su uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

Componentes del dispositivo

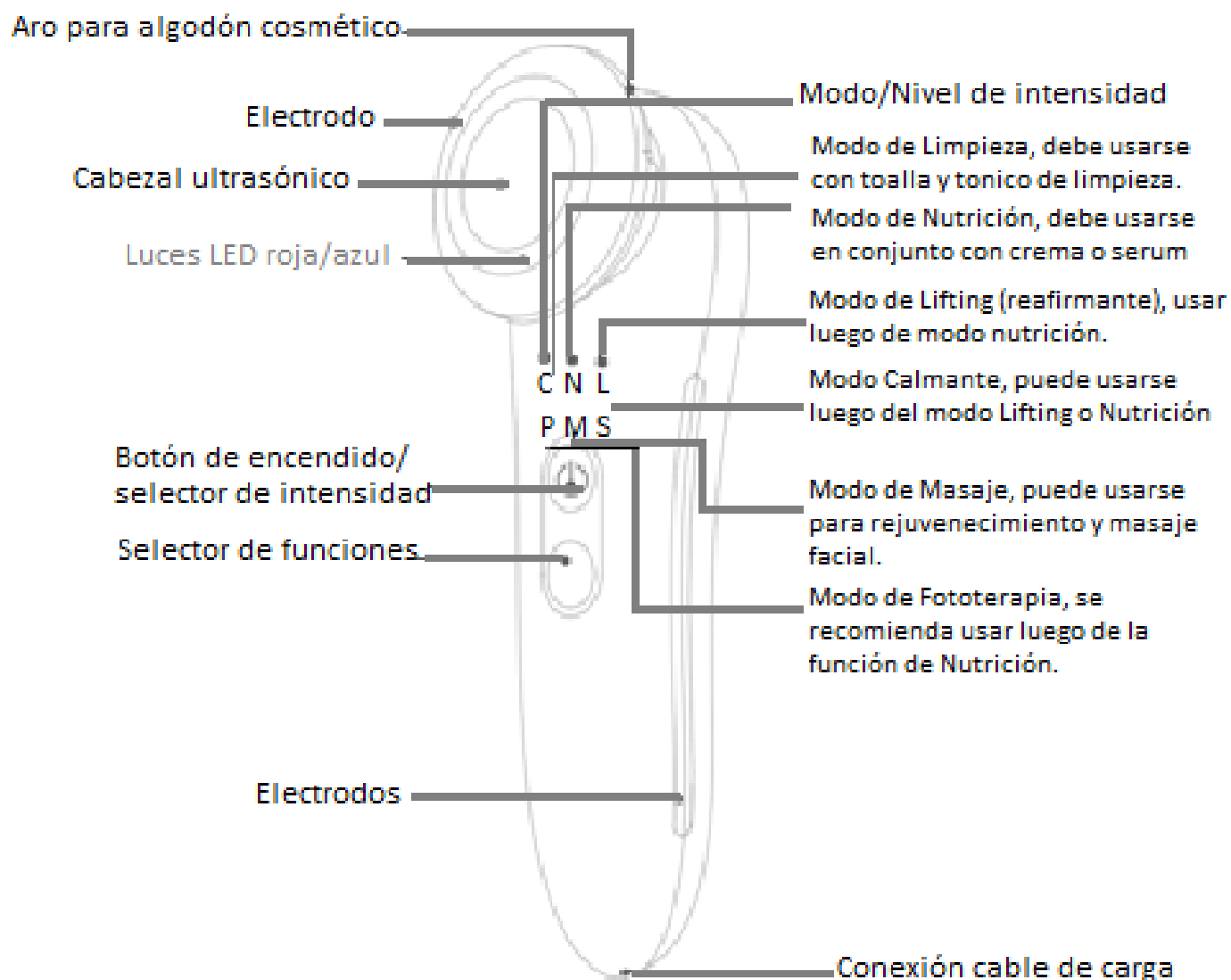

Accesorios



Dispositivo
Nanoskin-U x1



Manual de uso X1



Cable alimentador
USB x1



Aro para toalla
cosmética x1

Modo de carga

1. Cargue el producto primero antes de usarlo por primera vez.
2. Conecte siempre el cable de corriente o USB primero al dispositivo y a continuación a la toma de pared. Use únicamente una fuente de carga USB homologada para cargar Nanoskin-U.
3. Los indicadores del producto muestran luces fijas que indican que la carga está en marcha. Una vez completada la carga, todas las luces se encenderán. En este punto, desconecte el producto del cable USB y desconecte el cargador de la toma de corriente. Es normal si el producto y el cargador están un poco calientes.
4. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente. El tiempo puede variar depende de circunstancias específicas.

Advertencia	No inserte ni extraiga el cable de alimentación con las manos mojadas puede provocar descargas eléctricas y cortocircuitos.
	Mantenga alejado del agua incluidas la bañera y la ducha. Si la unidad cae en agua por accidente, desenchúfela de inmediato.
	Debe usar el cargador que cumpla con los requisitos de carga.
	Si la línea de carga está dañada o el enchufe está flojo, deje de cargarlo inmediatamente.
	No tuerza, enrolle o doble el cable alrededor del alimentador.

Modo de uso

Modo de uso y selección: Nanoskin-U tiene seis modos de trabajo, por lo que parta escogiendo una de las siguientes; Cleansing (limpieza), Nourishing (nutrición), Lifting, Photon (fototerapia), Massage (rejuvenecimiento), Soothing (calamante). Mantenga presionado el botón de encendido para arrancar.

1. Modo de Cleansing (limpieza): la luz indicadora "C" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la compresión en caliente y la función de exportación de iones estarán sincronizadas. En este modo, use el anillo de retención de algodón cosmético para instalar la toallita y use tónico de limpieza.

2. Modo Nourishing (nutrición): la luz indicadora "N" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la compresa caliente, la importación ultrasónica y la electroporación serán sincrónicas. El modo de importación se usa después de aplicar productos para el cuidado de la piel, aplique un serum de consistencia liquida o menos liquida, si tiene dudas sobre que activo usar para su tratamiento consulte a nuestra asesora en nuestra web

3. Modo Lifting (tonicidad): la luz indicadora "L" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la compresa caliente, el levantamiento ultrasónico y la electro estimulación muscular serán sincrónicos. Use un gel conductor a base de agua y glicerina para que la electro estimulación llegue al musculo para tonificarlo.

4. Modo Photon (rejuvenecimiento y calmante): la luz indicadora "P" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la luz LED roja y azul alterna serán sincronizadas. Aplique un gel o su serum preferido.

5. Modo de Massage (rejuvenecimiento): la luz indicadora "M" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la compresa caliente y la luz roja LED estarán sincronizadas.

6. Modo Soothing (calmante): la luz indicadora "S" se encenderá, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre tres niveles de intensidad. En este momento, la vibración sónica, la compresa caliente y la luz azul LED estarán sincronizadas.

Inicio y pausa: Nanoskin-U posee un mando de control de contacto inteligente. Cuando el electrodo se sostiene en la mano y la cabeza del producto toca la piel, se activan las funciones. Cuando la cabeza del producto abandona la piel, la función se suspende.

Consejos de uso

Nanoskin-U tiene 3 funciones que son la base de un buen tratamiento, recomendamos siempre hacer por lo menos las funciones C;N;L


"C" Clean: limpieza profunda

"N" Nourishing : Nutrición

"L" Lifting : Electro estimulación Muscular

- Elija el modo y nivel correctos de acuerdo con su condición de piel, para pieles sensibles utilice el nivel 1 o 2, verifique que no genere reacciones alérgicas de lo contrario suspenda el tratamiento.
- No utilice Nanoskin-U con demasiada frecuencia. El uso frecuente puede afectar la salud de la piel.
- Se recomienda que el modo de limpieza (Cleansing) se realice cada 2 o 3 días por semana. Las funciones restantes, se pueden llevar a cabo de acuerdo con los hábitos de cuidado personal durante la hora de acostarse y se pueden usar todos los días. Se recomienda que generalmente se pueda usar una sola vez al día por 2 a 3 minutos por función
- Para garantizar el funcionamiento normal del producto, es necesario tocar el electrodo que se encuentran en los costados del dispositivo cuando se utiliza.

Especificaciones

Nombre del producto	
Modelo	F65U
Especificaciones de batería	3.7V, 800mAh
Tiempo de carga	2 horas aproximadamente
Consumo de energía	3 W máximo
Requisitos de carga	5V 1A
Corriente de espera	Menos de 20 uA
Funciones	Clean, Nourishing, Lifting, Photon, Massage, Soothing
Botón operacional	Presione botón de encendido, presione brevemente el nivel de ajuste, presione brevemente el botón de modo para cambiar de modo/función
Otras funciones	Encendido / pausa en contacto con la piel
Peso	145grs.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los beneficios de Nanoskin-U?

R: El modo de limpieza (Cleansing) de este dispositivo, depende de la vibración sónica y la compresa caliente para ayudar a abrir los poros. Junto con la toalla y tónicos de limpieza, se usan para limpiar los poros mediante adsorción con iones. El modo de nutrición (Nourishing) ayuda a que los poros se relajen y se abran bajo la acción de la vibración sónica y la compresa caliente, y los efectos duales de ultrasonidos y corriente galvánica pueden ayudar a la absorción de productos para el cuidado de la piel como cremas o serum. El modo tonificación (Lifting) es la sincronización del masaje sónico, la compresa caliente, la elevación ultrasónica y la elevación por microcorriente EMS, ayuda a promover la absorción de productos para el cuidado de la piel, además de ayudar a tonificar y reafirmar la musculatura facial. El modo de fototerapia (Photon) utiliza principalmente el rejuvenecimiento de fotones, el efecto calmante del cuidado, el masaje y el modo calmante pueden relajar, calmar la piel del rostro.

R: Se recomienda que el modo Limpieza se pueda usar una vez cada dos o tres días; El modo Nutritivo se puede usar todos los días después de aplicar los productos para el cuidado de la piel, y cada vez se recomiendan dos o tres minutos; el modo Lifting, Massage, Photon, Soothing se puede usar después del modo Nourishing según su tipo de piel o necesidad.

¿Cómo usar el producto correctamente?

Al operar el producto, asegúrese de que la mano que lo sostiene toca el electrodo en el costado del producto, y la función correspondiente puede activarse cuando la parte conductora de metal de la cabeza toca la piel. Cuando lo use, toque suavemente la piel, levante y deslice lentamente por la piel, evite presionar vigorosamente o empujar y jalar hacia abajo.



Trabaje con movimientos circulares en forma ascendente, desde la mandíbula hasta el lóbulo de las orejas



Trabaje con movimientos circulares en forma ascendente, desde la comisura de los labios hasta el final de los pómulos.



Trabaje con movimientos ascendentes, por todo el contorno de ojos (no zona de ojeras), donde exista presencia de hueso.



Trabaje con movimientos lentos y ascendentes desde el entrecejo, cubriendo toda la zona de frente, como indican las flechas.



Deslice el dispositivo lentamente adelante y hacia atrás, por los costados del cuello, evitando pasar por la zona centro (tiroides).

¿El producto es resistente al agua?

El cabezal del producto es resistente a la humedad para facilitar su limpieza pero el cuerpo no lo es, por lo que no se puede sumergir en agua. Solo se puede limpiar con una servilleta de papel o un algodón húmedo o seco.

¿Quiénes no pueden utilizar NanoSkin-U?

- No puede ser utilizado por personas en periodo de embarazo y lactancia, personas con

marcapasos, desfibrilador interno u otro dispositivo electrónico implantado. Personas con deterioro del sistema inmunológico debido a enfermedades inmunosupresoras como Sida o por el uso de medicación inmunosupresora.

- No puede utilizar NanoSkin si tiene implantes metálicos en la zona de tratamiento (como coronas de oro o hilos tensores). No es el caso de implantes dentales.
- Antecedentes de cicatrización queloide, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- Cualquier procedimiento quirúrgico, realización de nueva piel mediante laser o exfoliación química profunda dentro de los últimos 3 meses o que todavía se encuentra en proceso de cicatrización completo.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales o permanentes en la zona de tratamiento, consulte a su médico antes de utilizar NanoSkin.
- Presenta alguna sensibilidad a la luz.
- Tiene puestos lentes de contacto.
- Ha sufrido de migrañas durante los últimos 2 años.
- Toma algún medicamento que pueda provocarle sensibilidad a la luz o a la piel.
- Tiene manchas oscuras como lunares, tatuajes, marcas de nacimiento, etc.
- Es menor de 18 años.

Garantía

El dispositivo cuenta con 1 año de garantía en el caso que presente fallas de funcionamiento o defectos materiales, el producto tiene derecho a una evaluación técnica desde su proveedor legal de Nanoskin-U. Esta garantía se extiende solo al comprador minorista original con el comprobante de compra original y solo cuando se compra a un minorista o revendedor autorizado.

1. Preste atención a la siguiente información para proteger los derechos legales de los consumidores

- Conserve el embalaje del producto, los accesorios, la factura de compra, etc.
- Puede solicitar el servicio postventa en línea de nuestro producto, luego manejarlo de acuerdo con el resultado de la comunicación o enviar el producto con un problema de calidad a nuestra empresa.
- La validez de su garantía se calcula a partir del día de la factura emitida, o puede consultar el tiempo de compra en el registro del sistema de comercialización de nuestra empresa.

2. Derechos del consumidor si el producto falla funcionalmente y no está dañado por factores creados por el hombre durante el uso normal del instrumento de rejuvenecimiento inteligente.

- Dentro de los 7 días a partir del día de la compra, puede optar por devolución o cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.
- Dentro del 1 año a partir del día de la compra, puede optar por cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.

3 Cuando ocurre una de las siguientes situaciones, el producto está fuera del alcance de la garantía gratuita. Nuestra empresa o la. El centro de servicio autorizado cobrará razonablemente por la reparación.

- No tiene una factura válida está borrada.
- El producto está dañado por no uso, mala mantención o conservación.
- El producto está dañado por haber sido desarmado o reparado sin la autorización de la compañía Nano Time;
- El producto está dañado debido a la humedad, caída o quemado de la placa de circuito
- La superficie del instrumento se daña durante el uso, a excepción de la grieta de la carcasa debido a la estructura y el material.

ESQUEMA DE USO NANOSKIN-U

Pasos	Funciones	Forma de uso	Tecnología que interviene
1 Clean "C"	Limpieza profunda	Poner paño sobre cabezal aplicar tónico de limpieza (líquido) y de manera circular masajear sobre la zona a tratar	Ionización positiva + compresión de calor + Masaje ultrasonico
2 Nourishing "N"	Nutrición profunda	Retirar paño y limpiar el cabezal, aplicar serum (consistencia líquida u oleosa) en su rostro y de manera circular masajear la zona a tratar.	Ionización negativa + compresión de calor + masaje ultrasónico
3 Lifting "L"	Tonificación muscular	limpiar el cabezal , aplicar algún gel conductor de su preferencia directamente en su rostro y de manera circular masajear la zona a tratar siempre con movimiento ascendente.	Electro estimulación + compresión de calor+ masaje ultrasónico
4 Massage "M"	Activación de colágeno	limpiar el cabezal ,aplicar gel o serum y masajear de manera circular la zona a tratar.	Fototerapia roja + compresión de calor+ masaje ultrasónico
5 Soothing "S"	Desinflamación de la zona	Aplicar gel de manera circular masajear la zona a tratar.	Fototerapia Azul + compresión de calor+ masaje ultrasónico
6 Photon "P"	Activación celular	Aplicar gel y de manera circular masajear la zona a tratar, esta modo es libre uso	Fototerapia Azul + Roja +compresión de calor+ masaje ultrasonico