

ESPAÑOL

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

NANOSKIN-E

NANOSKIN ES MARCA DE TIMELAB JAPÓN

Todas las imágenes en este manual son solo para referencia.  
Consulte el producto físico para conocer las características específicas.

### Precauciones de Uso

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar NanoSkin-E. Utilice NanoSkin-E tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado. Si ocurre algo inusual con el dispositivo o en la piel, deje de usarlo inmediatamente. El uso del instrumento defectuoso puede provocar una segunda falla o lesiones en la piel.

### Sobre NanoSkin-E

NanoSkin-E es el primer equipo multifunción diseñado con 6 tecnologías en 1, diseñado para uso personal, fácil de usar, seguro y efectivo para que puedas obtener todos los beneficios de un tratamiento profesional en la comodidad de tu hogar. NanoSkin elimina impurezas, nutre, rejuvenece, cierra los poros y reafirma tu piel en la zona de rostro y cuello. NanoSkin rejuvenece mediante radiofrecuencia (RF) alcanzando los 40°C gracias a las ondas electromagnéticas que emite, reafirma mediante electroestimulación muscular (EMS), limpieza facial mediante Iones (ION), nutre mediante electroporación (ENI), regeneración celular mediante fototerapia y cierre poros mediante frío (Cool).


NanoSkin-E en la función que trabaja solo con radiofrecuencia puedes utilizar cualquier gel conductor a base de glicerina (no glicerina líquida) y en la función de electroestimulación, puedes utilizar cualquier gel a base de agua que encuentres en el comercio de tu región.

### Precauciones

<b>Importante</b>	Conecte adecuadamente el enchufe del cargador a la toma de corriente de la casa para evitar el mal funcionamiento o sobrecalentamiento del equipo.
	No exponga el equipo a altas temperaturas.
	No coloque el dispositivo en contacto con el agua o la humedad.
	No inserte y extraiga el cable de alimentación con la mano húmeda (puede provocar una descarga eléctrica y un cortocircuito)
	Si el producto presenta cualquier tipo de deformación por exposición a altas temperaturas o si la batería del equipo presenta alguna falla, detenga el uso de NanoSkin-E inmediatamente.
	Mantenga el dispositivo alejado de productos inflamables como aerosoles.
	No utilice cargadores rotos o que no se ajusten correctamente al toma corriente, puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos.
	No utilice cargadores que no cumplan con los requisitos anteriores, evite accidentes y daños en el equipo.
	No utilice adaptadores a una tensión de 100-240, para evitar incendios, descargas eléctricas, etc.

	Por favor no utilice este equipo para ningún otro propósito más que para el que fue diseñado.
	Nunca intente desarmar el dispositivo o inserte objetos dentro de este, puede provocar serios daños al equipo y a usted. La compañía no se hace responsable por daños o mal uso del dispositivo.
	Mantenga el equipo alejado de los niños menores de 18 años.
	Detenga el uso o desconecte el equipo ante cualquier sobre calentamiento anormal.
	Antes de utilizar NanoSkin-E en el cualquier zona facial, realice una prueba de testeo en el antebrazo con y sin cremas. Si presenta cualquier sensacional anormal como dolor o ardor por más de 48 horas detenga su uso inmediatamente.
	Nunca deje el equipo detenido en una zona durante el tratamiento en el modo de radiofrecuencia, deslice NanoSkin-E suavemente sobre la piel.
	Por favor, use y mantenga la línea de carga correctamente. No doble, estire, retuerza, presione ni enrolle alrededor del cargador.

### Componentes del dispositivo

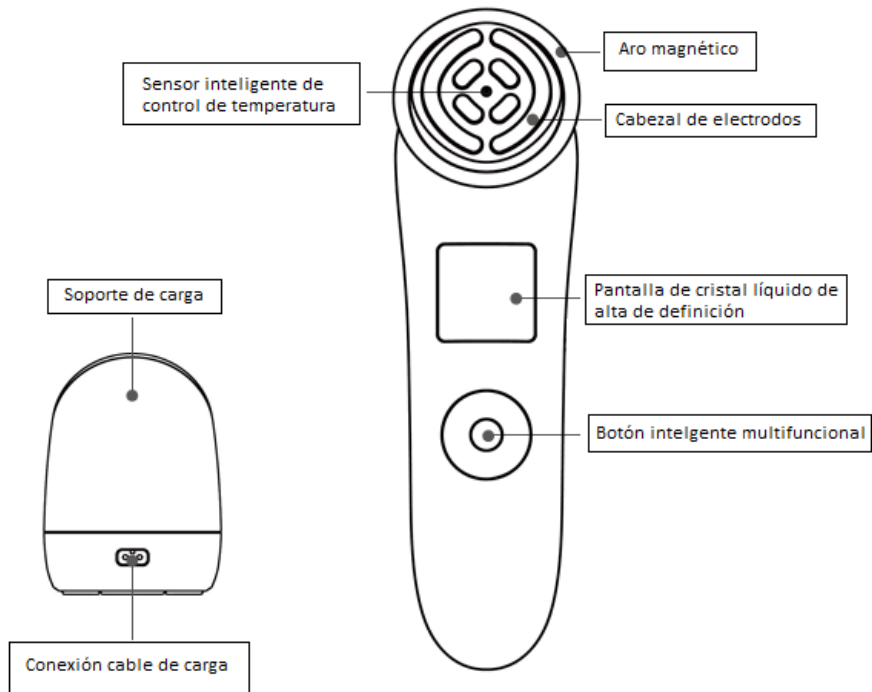

### Accesorios

Dispositivo NanoSkin-Lx 1



Soporte para carga x1




Transformador x1



Manual de uso x1



## Introducción a la pantalla de visualización

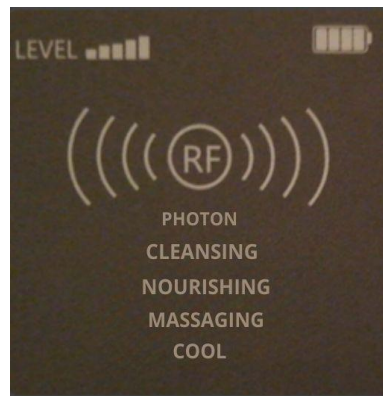

### LEVEL

Indicador de nivel de intensidad del modo seleccionado, el ajuste se puede hacer a través de las teclas izquierda y derecha.



RF se refiere al modo de Radiofrecuencia, está listo para sincronizar en combinación con 4 funciones diferentes de uso.

### ❖ CLEANSING

El modo Limpieza (Cleansing) función ionizante positiva se sincronizará con vibración y radiofrecuencia

- Para la función de limpieza (ION) (3 a 4 minutos de uso) puede utilizar toalla de limpieza de algodón con o sus propios tónicos de limpieza.

### ❖ NOURISHING

El modo Nutrición (Nourishing) se sincronizará con vibración sónica, radiofrecuencia, fototerapia (luz led roja) y corriente galvánica para nutrición ( penetración de activos)

- Junto con la función de nutrición (ENI+PHOTO) (3 minutos de uso) puede usar sus propios serum, siempre líquidos o semilíquidos.

**SI TIENES DUDAS SOBRE QUE SERUM USAR CONSULTANOS EN LOS CHAT HABILITADOS**

## ❖ MASSAGING

El modo Masaje (Massaging) se sincroniza con vibración sónica, radiofrecuencia, electro estimulación muscular y fototerapia (luz led roja y azul).

- Para la función de rejuvenecimiento y tonificación (EMS+PHOTO) (3 a 4 minutos de uso) puede utilizar cualquier gel que sea a base de agua y glicerina.

## ❖ RF RADIOFRECUENCIA + PHOTON (Uso Opcional)

El modo Radiofrecuencia, está indicado para activar la regeneración del colágeno y elastina, atenuando líneas de expresión de **zona de escote, manos, codos, rodillas, cuello, zonas que necesiten reafirmarse**

- Para la función de rejuvenecimiento (RF) (3 A 4 minutos de uso) puede utilizar cualquier gel que sea a base de agua y glicerina.

## ❖ COOL+PHOTON

El modo Calmante (Cool) se sincroniza con vibración sónica, compresión de frío y luz azul Led. Una vez completados los tratamientos Nourishing y Massaging, elija la función de frío (COOL) para reafirmar y reducir los poros abiertos, de esta manera la piel se mantiene limpia y fresca por mucho más tiempo. En esta función puede usar agua desmineralizada o gel conductor, mejorara la transmisión del frío.}

## NANOSKIN-E

Tiene un tratamiento indicado de 3 veces (día por medio) por semana por un lapso de 7 a 8 semanas en las que verá su piel con líneas de expresión mucho más atenuadas, mas tersa, firme, limpia y humectada. Una vez completado el tratamiento, se trabaja con Nanoskin 1 vez a la semana para mantener los resultados obtenidos.

**NOTA:** Si el dispositivo no se utiliza por un periodo de tiempo, la pantalla se cerrará automáticamente y luego de 5 minutos sin uso el equipo se apagará.

## Modo de Uso

NanoSkin-E posee 6 diferentes tipos de tratamientos combinados con RADIOFRECUENCIA para su rostro LIMPIEZA, NUTRICIÓN, MASAJE y FRIO, de acuerdo con las necesidades del usuario común. Cuando utilice el producto, elija la combinación que necesita y siga los pasos a continuación.


### ▶ 1- MODO CLEANSING



Lave su rostro con abundante agua



**Limpieza por ionización galvánica positiva** / en este tratamiento debe retirar el anillo metálico y poner una toalla de limpieza húmeda o aplica un tónico micelar de limpieza a la toalla, asegure la toalla con el anillo al cabezal, luego masajear siempre de manera circular la zona por 2 a 3 minutos.

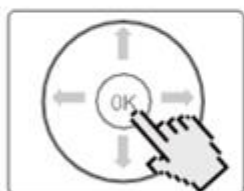


Para encender el equipo mantenga la tecla del centro presionada hasta que encienda. Para apagar o pausar repita el procedimiento



Presione las teclas arriba/abajo para seleccionar el tratamiento. Para seleccionar el nivel de intensidad presione las teclas derecha/izquierda.

Para comenzar el tratamiento presione la tecla "OK"

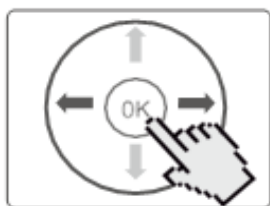

Durante el tratamiento, puede cambiar los niveles de intensidad según su necesidad, con las teclas izquierda y derecha. Con el botón central (OK) presiónelo 1 vez para pausar el tratamiento, para reanudar el tratamiento vuelva a presionarlo. Se sugiere que el modo Cleansing se ejecute aproximadamente por 3 minutos. Lave la cara después de completar la operación o limpie la cara con alguna toalla húmeda.

**Nota:** debido a que el nivel de tolerancia o sensación corporal varía de acuerdo a cada persona, comience desde el nivel de intensidad más bajo e ir aumentando de intensidad de acuerdo su comodidad o nivel de tolerancia (La Radiofrecuencia trabaja hasta 40°) para asegurar un tratamiento seguro y agradable.


## ▶ 2-NOURISHING+PHOTON




**Nutrición profunda por ionización galvánica negativa:** Quite la toalla y aplique sobre la piel algún tónico de nutrición el que usted desee de acuerdo a su tratamiento, se recomienda un sérum en formato acuoso, o semilíquido, nuevamente con movimientos circulares siempre ascendentes aplicar en la zona a tratar, Nanoskin-E mediante ionización permea la célula para que su producto de nutrición penetre más profundo y rápido acelerando sus resultados, tiempo 3 a 4 minutos.



Nanoskin-E gracias a su terapia de corriente galvánica potenciara su tratamiento elegido. Por ejemplo para atenuar arrugas y líneas de expresión un serum concentrado de Ac. Hialuronico tendrá efectos muy notorios sobre la piel. Para más consejos puede pedirlo a nuestra asesora.

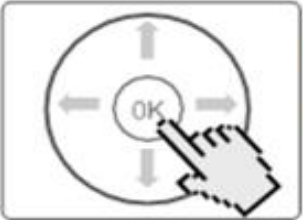

**Para encender el equipo mantenga la tecla del centro presionada hasta que encienda. Para apagar o pausar repita el procedimiento**

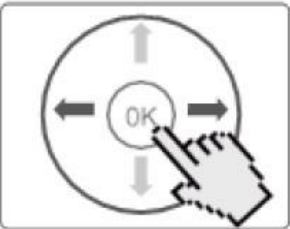

Durante el tratamiento, con las teclas izquierda/derecha, puede cambiar el nivel de intensidad segun su necesidad. Presione 1 vez el boton central (OK) para pausar el tratamiento, para reanudar el tratamiento vuelva a presionarlo. Se sugiere que el modo Nourishing se ejecute aproximadamente por 3 minutos. Use el paño húmedo o la almohadilla de algodón para limpiar la cabeza y la posición del electrodo del instrumento después de completar la operación.

**Nota:** debido a que el nivel de tolerancia o sensación corporal varía de acuerdo a cada persona, comience desde el nivel de intensidad más bajo e ir aumentando de intensidad de acuerdo su comodidad o nivel de tolerancia (La Radiofrecuencia trabaja hasta 40°) para asegurar un tratamiento seguro y agradable.

### ▶ 3 MASSAGING+PHOTON




#### **Electro estimulación muscular:**

**Aumento de tonicidad muscular:** Aplique el gel conductor «novaskin» en la zona a tratar sentirá contracciones musculares, eso es señal que el equipo está funcionando adecuadamente estimulando el musculo a la contracción tonificando la zona, regule la intensidad según su tolerancia. Tiempo 3 a 4 min.

---



Nanoskin-E utiliza pulso de estimulación muscular para este proceso necesita un gel conductor a base de agua y glicerina, puede encontrar el gel especialmente formulado para nuestros equipos en nuestra web o comprar un alternativo en el comercio.

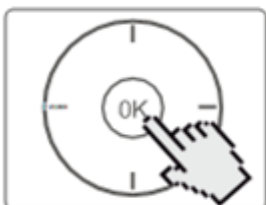

**Para encender el equipo mantenga la tecla del centro presionada hasta que encienda. Para apagar o pausar repita el procedimiento**


---



**Presione las teclas arriba/abajo para seleccionar el tratamiento. Para seleccionar el nivel de intensidad, presione las teclas izquierda/derecha.**

**Para comenzar el tratamiento presione la tecla OK**

---

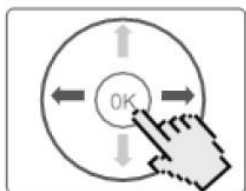

Durante el tratamiento, con las teclas izquierda/derecha, puede cambiar el nivel de intensidad según su necesidad. Presione 1 vez el botón central (OK) para pausar el tratamiento, para reanudarlo el vuelva a presionarlo. Se sugiere que el modo Massaging se ejecute por aproximadamente 5-10 minutos. Use un paño húmedo o almohadilla de algodón para limpiar el cabezal y la posición del electrodo del dispositivo después de completar la operación.

Una vez termiando el tratamiento, puede lavar su rostros con abundate agua para retirar el exceso de gel o cualquier otro producto que haya utilizado para esta función.

---

**Nota:** debido a que el nivel de tolerancia o sensacion corporal varia de acuerdo a cada persona, comience desde el nivel de intensidad mas bajo e ir aumentando de intensidad de acuerdo a su comodidad o nivel de tolerancia (La Radiofrecuencia trabaja hasta los 40°), para asegurar un tratamiento seguro y agradable. En la funcion el masaje muscular de micro-corriente (EMS) sentirá una sensación de pequeñas punzadas o de una descarga eléctrica débil en el rostro. Las diferentes sensaciones corporales varían según los diferentes niveles de intensidad, que es el proceso normal y la sensación corporal de la micro corriente EMS, para causar una contracción muscular similar a la que envía el sistema nervioso central, para controlar las acciones de los músculos. Con esto, busca tonificar y fortalecer la musculatura facial.



## ▶ 4-COOL+PHOTON



**Modo Cool** , en este modo se recomienda aplicar gel o aplicar un poco de agua sobre la piel para que el frio pueda ser conducido de manera más efectiva, en este proceso el equipo se enfriara para cerrar poros y evitar la pérdida de humedad, la terapia de luz led azul ayuda a calmar la zona tratada.



Presiona las taclas arriba/abajo para seleccionar el tratamiento de Frio. Para comenzar presiona la tecla OK.



Recomendamos su uso durante 3 minutos, después de usarlo, mantenga presionado el botón central para apagar y limpie el cabezal con una almohadilla seca.

**Nota:** El tiempo de tratamiento de las cuatro primeras funciones se detendrán automáticamente después de usarlo durante 15 minutos, el modo FRÍO se detendrá después de 3 minutos.

### Sobre el Tratamiento

1. Si utiliza por primera vez NanoSkin-E, recomendamos comenzar, en cualquiera de las funciones, en el nivel más bajo e ir aumentando de intensidad gradualmente de acuerdo a la tolerancia o necesidad de cada persona.
2. **Las diversas combinaciones de funciones se pueden utilizar por separado o en conjunto. La recomendación para un resultado óptimo es utilizar las 4 funciones en un mismo día (solo 3 veces por semana)** en el orden:
  1. ION (Cleansing)
  2. ENI +PHOTON (Nourishing)
  3. EMS +PHOTON (Massaging)
  4. COOL +PHOTON

3. **No haga exceso de tratamiento con NanoSkin-E. Lea la descripción mencionada para el tiempo de operación, se recomienda siempre 3 a 4 minutos por zona, 1 vez al día (recomendado por la noche) por 6 a 8 semanas.**

La función EMS-Photon se puede usar máximo 5 min, la función nutrición (ENI+PHOTO) se puede utilizar con productos para nutrición y cuidado de la piel siempre en formatos acuoso o un poco más densos, no usar aceites de frutos o semillas.

Recuerde la función RF está funcionando en paralelo a todas las demás funciones, es importante que no haga más de 3 veces a la semana alguno de los tratamientos por separado.

### Zonas de Tratamiento



Trabaje con movimientos circulares en forma ascendente, desde la mandíbula hasta el lóbulo de las orejas



Trabaje con movimientos circulares en forma ascendente, desde la comisura de los labios hasta el final de los pómulos.



Trabaje con movimientos ascendentes, por todo el contorno de ojos (no zona de ojeras), donde exista presencia de hueso.



Trabaje con movimientos lentos y ascendentes desde el entrecejo, cubriendo toda la zona de frente, como indican las flechas.



Deslice el dispositivo lentamente adelante y hacia atrás, por los costados del cuello, evitando pasar por la zona centro (tiroides).





1. Por favor, ajuste la potencia si siente incomodidad mientras trabaja en alguna zona facial pequeña o delicada.
2. Por favor, trabaje en nivel de intensidad bajo mientras trabaje en la zona de contorno de ojos lateral (patas de gallo)
3. No deje el equipo detenido durante el tratamiento en un lugar, tampoco presione el dispositivo sobre la piel cuando este en uso.
4. Evite la zona de ojeras y párpados.

## Limpeza y Mantenimiento

- Por favor, limpie la cabeza del instrumento antes de usar.
- Limpie el anillo magnético del imán con un algodón o un paño suave. Preste atención a la limpieza y mantenimientos del dispositivo.
- Por favor, no lave ni sumerja el equipo en el agua. Manténgalo alejado de la humedad.

## Modo de Carga

Por favor, siga los siguientes pasos para cargar el producto por primera vez o con poca batería.

<b>1</b> 	Inserte el conector del cable carga correctamente en la base de carga.
<b>2</b> 	Inserte el enchufe del adaptador correctamente en la toma de la casa.
<b>3</b> 	Durante la carga del dispositivo, la pantalla se ilumina y la barra de energía parpadea. Cuando el equipo está completamente cargado, la pantalla se ilumina y la barra de energía está llena. El tiempo de carga completa es de 2 horas aproximadamente.
<b>4</b> 	Una vez cargado el equipo, primero desconecte el conector de la base de carga y luego de la toma de corriente. Asegurese de guardar el cable de carga correctamente para prolongar su vida útil.

Nota: Si el equipo durante su uso tiene poca batería, puede conectar directamente el conector del adaptador a la interfaz de carga debajo del equipo. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Especificaciones de entrada del adaptador	100-240V~50/60Hz 0.35A
Especificaciones de salida del adaptador	9V 1.5A
Frecuencia RF NanoSkin	1,3MHz
Tiempo de carga	3 horas aproximadamente
Tamaño pantalla	1.5 pulgadas
Función de teclas arriba y abajo.	Elige modo de tratamiento.
Función de teclas izquierda y derecha.	Ajusta nivel de intensidad
Función de la tecla central "OK"	Confirmación, encendido / apagado, pausa, inicio tratamiento.
Niveles de intensidad	5 niveles diferentes

\* Los parámetros de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

### Solución de Problemas.

Si el dispositivo no funciona como debería, las siguientes notas le ayudaran a detectar posibles problemas en el dispositivo y su configuración.

Falla Detectada	Posibles Causas	Solución
El equipo no carga	El dispositivo no está conectado correctamente al soporte de carga.	Coloque el dispositivo en el soporte de carga y asegúrese de que el punto de conexión esté completamente conectado a la base de carga.
	La base de carga no está conectada correctamente con la toma de corriente.	Compruebe la conexión del cargador a la toma de corriente de la casa o compruebe si la toma de corriente de la casa ha fallado.
El equipo no enciende	No se ha presionado el botón de encendido correctamente	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y el equipo se activará.
	La batería del dispositivo se queda sin energía.	Haga una carga completa de la batería.
Falla operativa	Batería baja	
	No conecta.	Por favor presione el botón de encendido
	La batería instalada internamente ha alcanzado su vida útil.	Consultar garantía en la tienda o centro de atención al cliente de este producto.
	No se puede escoger una función de uso	Presione las teclas arriba/abajo y luego presione el botón central OK
	El tiempo de operación ha terminado.	Por favor, elija nuevamente una función.

### ¿Cómo elegir los niveles de intensidad?

Con las teclas izquierda/ derecha se puede bajar o subir los niveles de intensidad, según su preferencia.

### ¿Es este dispositivo apto para menores?

De acuerdo con el ciclo de crecimiento de la piel, se sugiere que este producto sea utilizado por personas mayores de 25 años.

### ¿Por qué mi piel se calienta tanto durante el tratamiento?

Se sugiere usar NanoSkin en el nivel más bajo, en los primeros usos, hasta acostumbrarse a la temperatura. Si está familiarizado con el uso de este producto, puede elegir el nivel adecuado según la situación de cada piel. Nanoskin-E aplica terapia de radio frecuencia esta razón es por la cual la piel se calienta, es importante que siempre este el equipo en movimiento para evitar quemaduras en la zona.

### ¿Es este producto adecuado para diferentes tipos de piel?

Está contraindicado su uso en pieles con rosácea, dermatitis, eczemas, psoriasis o cualquier tipo de condición que se active con el calor. NanoSkin alcanza los 40°C en la función de radiofrecuencia.

También está contraindicado su uso en personas con cáncer o haya sufrido en el pasado, en especial cáncer de piel o lunares pre-malignos.

### ¿Quiénes no pueden utilizar NanoSkin?

- No puede ser utilizado por personas en periodo de embarazo y lactancia, personas con marcapasos, desfibrilador interno u otro dispositivo electrónico implantado. Personas con deterioro del sistema inmunológico debido a enfermedades inmunosupresoras como Sida o por el uso de medicación inmunosupresora.
- No puede utilizar NanoSkin si tiene implantes metálicos en la zona de tratamiento (como coronas de oro o hilos tensores). No es el caso de implantes dentales.
- Antecedentes de cicatrización queloide, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- Cualquier procedimiento quirúrgico, realización de nueva piel mediante laser o exfoliación química profunda dentro de los últimos 3 meses o que todavía se encuentra en proceso de cicatrización completo.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales o permanentes en la zona de tratamiento, consulte a su médico antes de utilizar NanoSkin.

## ¿Es este producto adecuado para usar en el baño o en el lavado de cara?

Este producto no es de alta impermeabilidad, por lo tanto, no lo use cuando tome un baño. Se sugiere utilizar NanoSkin fuera del baño.

## ¿Nanoskin-E para el cuerpo? :

Nanoskin ayuda a drenar la celulitis, disminuir la piel de naranja, tonificar zonas con pérdida de colágeno y suavizar su Superficie, Sólo debes aplicar algún gel con activos indicados para tratamiento corporales como cafeína, guaraná, centella asiática, etc. Existen muchos en el mercado.

Nanoskin ayudara a hacer penetrar los activos más profundo y rápido combinados con la corriente galvánica y Radiofrecuencia acelerara y mejorara considerablemente los resultados.

**Más recomendaciones puedes hacerlas al whatsapp o al chat de nuestra web.**

### Servicio postventa

#### Acerca de la batería interna

- Este producto utiliza una batería de litio, la batería tiene una garantía de seis meses.
- Este producto se desconectará automáticamente cuando esté completamente cargado. No es necesario sacar el dispositivo de la base de carga.
- La batería recargable interna de este producto es una batería de litio.

#### Eliminación del dispositivo

- NanoSkin se considera un dispositivo electrónico y debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de procesamiento de desechos si se va a abandonar el producto.

### Garantía

El dispositivo cuenta con 1 año de garantía en el caso que presente fallas de funcionamiento o defectos materiales, el producto tiene derecho a una evaluación técnica desde su proveedor legal de NanoSkin. Esta garantía se extiende solo al comprador minorista original con el comprobante de compra original y solo cuando se compra a un minorista o revendedor autorizado.

#### 1 Preste atención a la siguiente información para proteger los derechos legales de los consumidores

- Conserve el embalaje del producto, los accesorios, la factura de compra, etc.
- Puede solicitar el servicio postventa en línea de nuestro producto, luego manejarlo de acuerdo con el resultado de la comunicación o enviar el producto con un problema de calidad a nuestra empresa.
- La validez de su garantía se calcula a partir del día de la factura emitida, o puede consultar el tiempo de compra en el registro del sistema de comercialización de nuestra empresa.

**2 Derechos del consumidor si el producto falla funcionalmente y no está dañado por factores creados por el hombre durante el uso normal del instrumento de rejuvenecimiento inteligente.**

- Dentro de los 7 días a partir del día de la compra, puede optar por devolución o cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.
- Dentro del 1 año a partir del día de la compra, puede optar por cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.

**3 Cuando ocurre una de las siguientes situaciones, el producto está fuera del alcance de la garantía gratuita.**

- No tiene una factura válida está borrada.
- El producto está dañado por no uso, mala mantención o conservación.
- El producto está dañado por exceso de fuerza en modo de uso.
- El producto está dañado por haber sido desarmado o reparado sin la autorización de la compañía NanoTime
- El producto está dañado debido a la humedad, caída o quemado de la placa de circuito
- La superficie del instrumento se daña durante el uso, a excepción de la grieta de la carcasa debido a la estructura y el material.
- Fallo o daño resultante de la conexión de este producto con otros dispositivos de carga.
- Las fallas o daños resultantes de incendios, desastres naturales, daños por sal o voltaje anormal, etc.